

Client:

Tests realises par:

Ddispositif: SyriWave

Description:

Site:

Emplacement:

No de Serie: 01

Fabricant:

Modele:

Date du Test:

Date de Prochain Test:

Intervalle du Test:

Status General: Fail

Protocole de Test: Multi-Flo Test Import

Equipement de Test:

Modele Rigel Multi-Flo

No de Serie

Protocole Semi-automatic

#### Configuration

Test	Debit	Contre Pression	Contre Pression	Fenetre Echantillonnage (sec)	Duree	Limite Superieure %	Limite Inferieure %	Erreur	Expected Volume
Flow Rate Test	300.00 ml/h	0.00	mmHg	30	00:30:00	2	2	Instant Flow	-

#### Resultats de Test

Moyenne	Max	Min	Debit Instantane	Volume	Pression	Erreur %
297.98 ml/h	310.58 ml/h	284.32 ml/h	299.09 ml/h	49.41 ml	-10.00 mmHg	-0.304667


Commentaires:

Teste par


Signature

Date


## Instant Flow vs Time

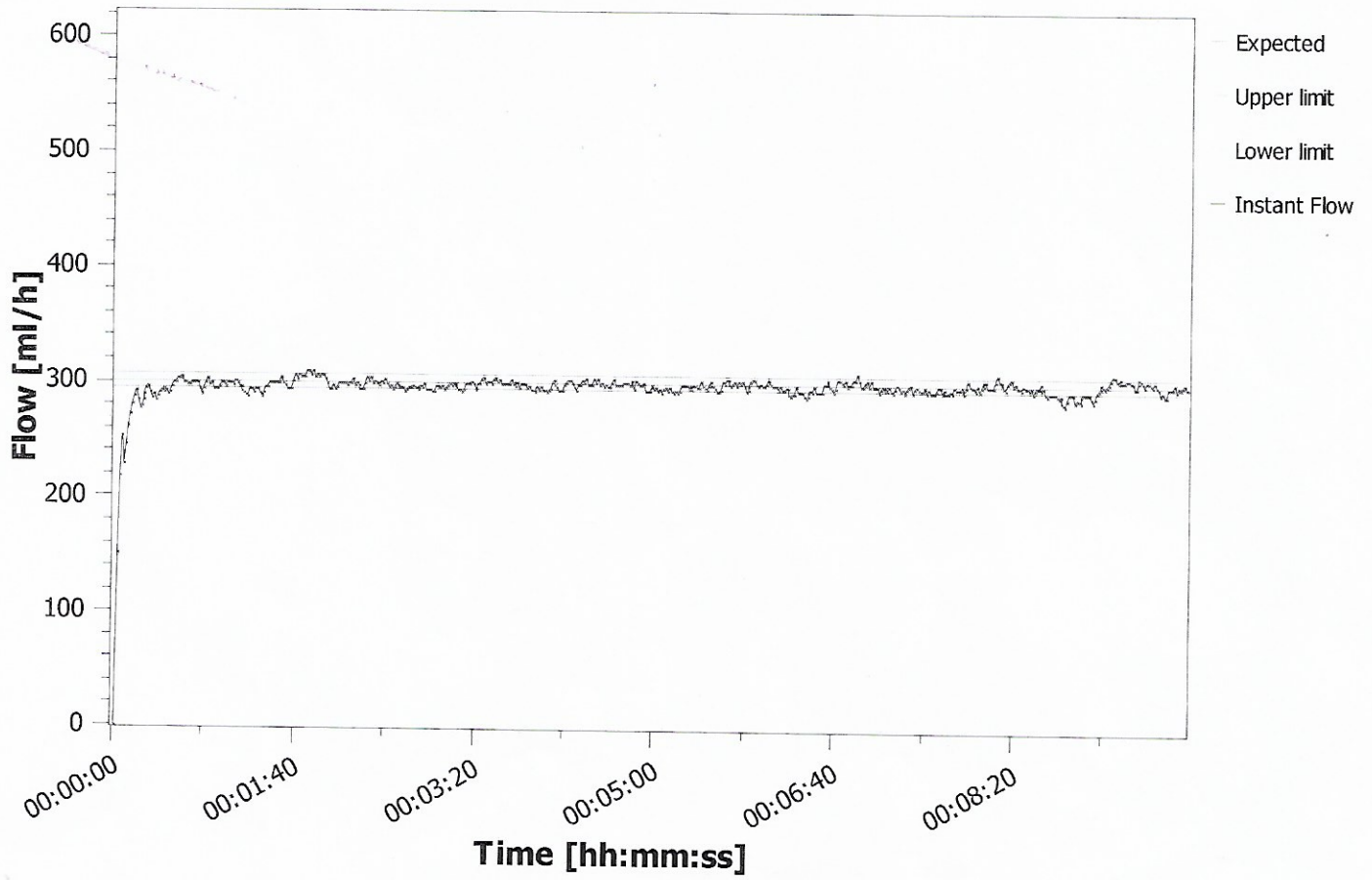

## Average Flow vs Time

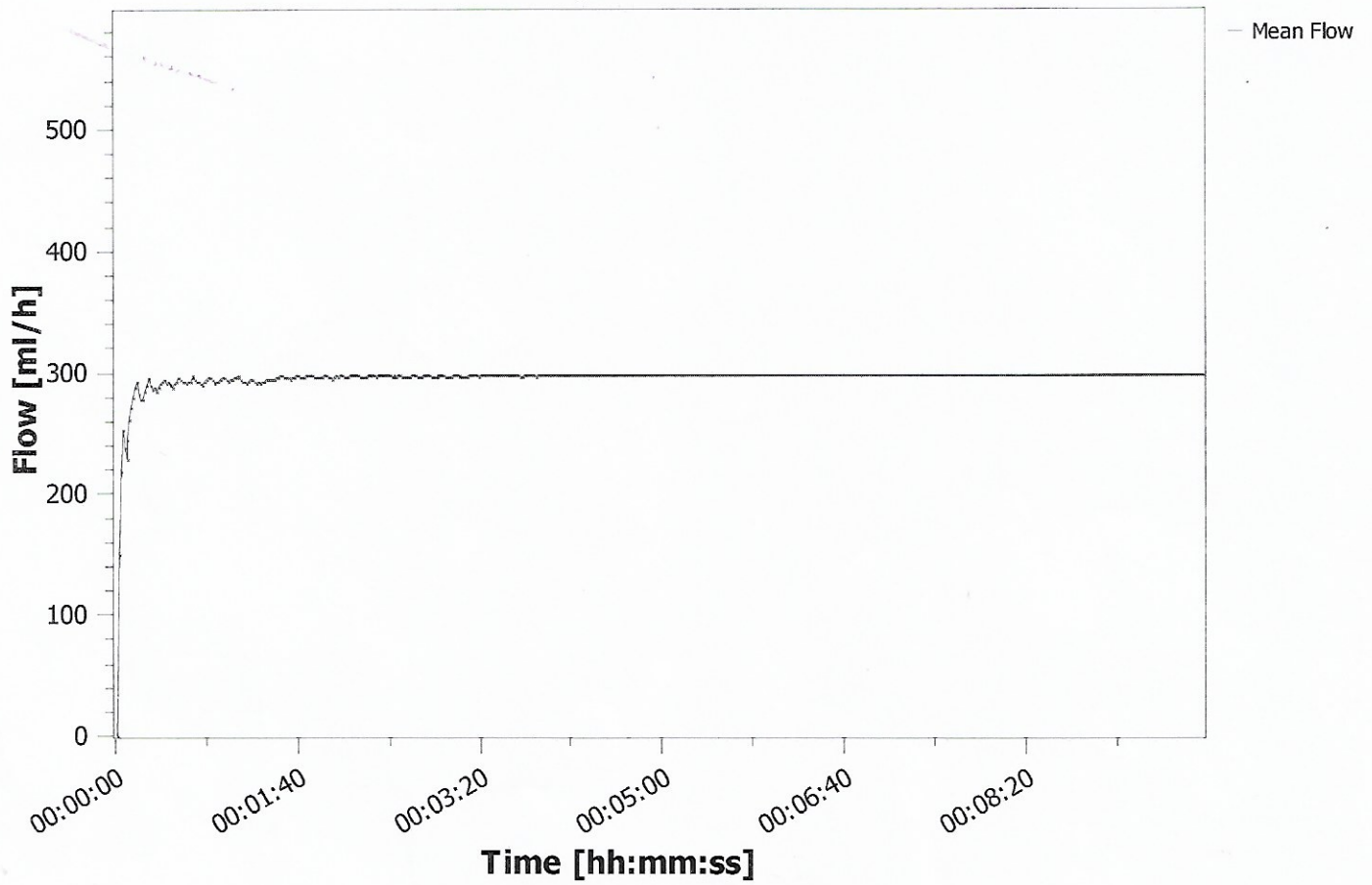

## Accumulated Volume vs Time

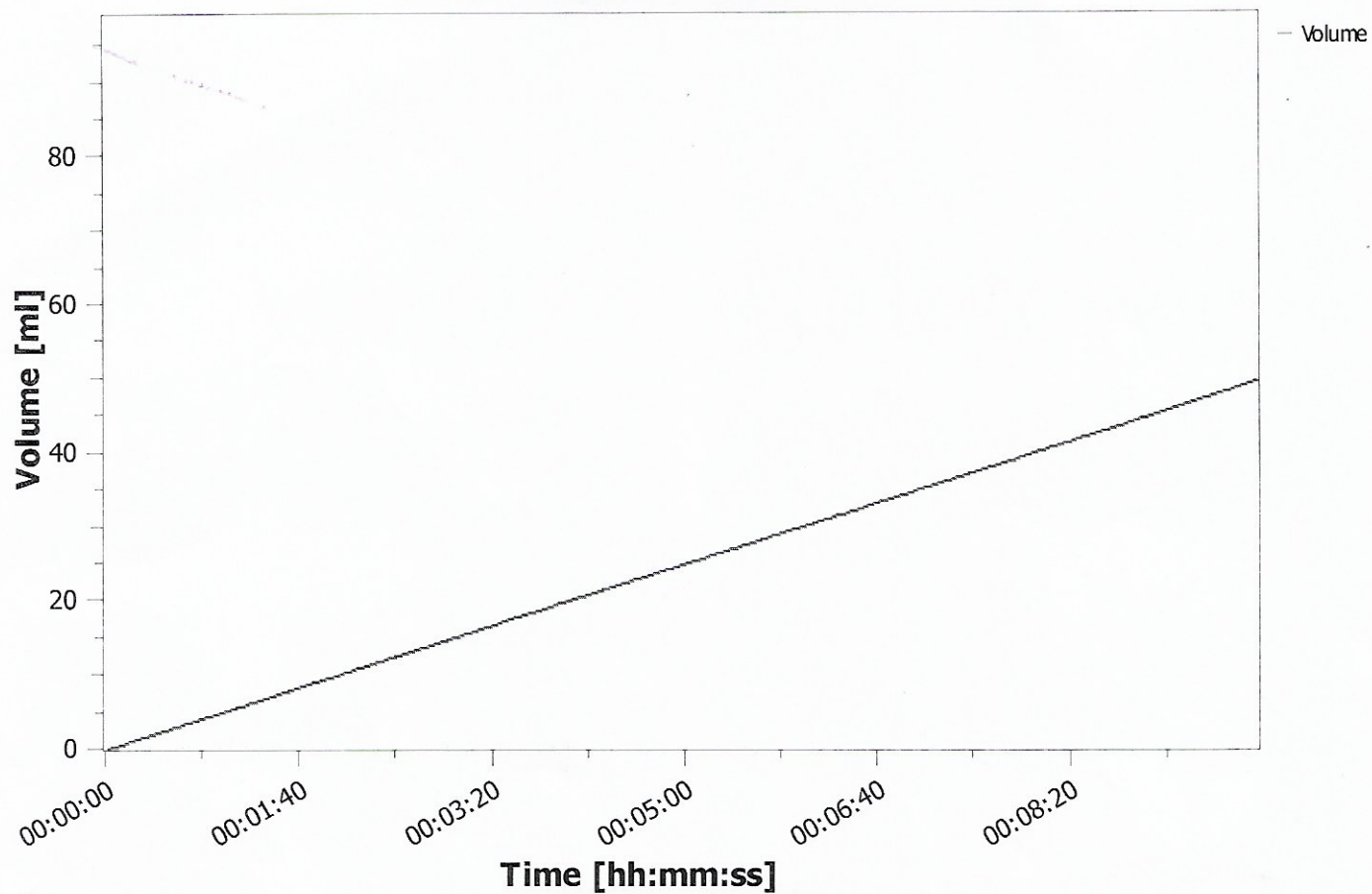

## Pressure vs Time

